

HONKON

3 Wavelengths Diode Laser



- ★ Vlnové délky 755nm 808nm 1064nm jsou vhodné pro odstranění chloupků celého těla a všechny typy kůže.
- ★ Využívá technologii micro kanálu a Německé D-ILAS laserové tmříže
- ★ Rozměr hlavice 12mm x 23mm a síla laseru 600w



Supreme-ICE-KK

Teorie léčby



Jak funguje 3 vlnový diodový laser


Trojitá vlnová délka spojuje 3 vlnové délky laseru do jediného inovativního násadce, který současně cílí na různé hloubky tkání a anatomické struktury ve vlasovém folikulu. Kombinací úrovní absorpce a průniku tří různých vlnových délek spolu s pokrytím ošetření, komfortem a nízkou údržbou diodového laseru.

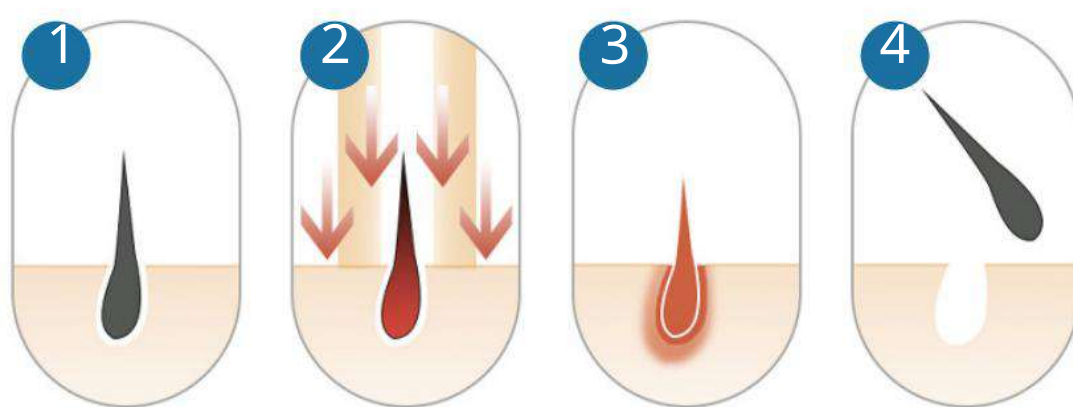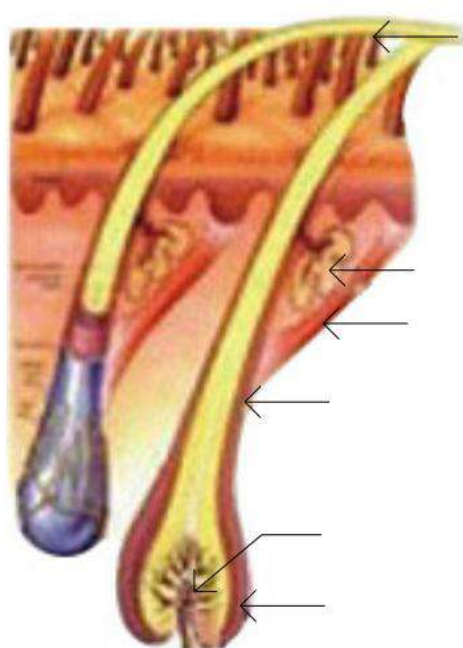


Depilace pomocí diodového laseru

Trojitá vlnová délka dosahuje nejbezpečnější a nejkompexnější depilace, která je dnes k dispozici.


Zařízení pro odstraňování chloupků diodovým laserem se 3 vlnovými délkami

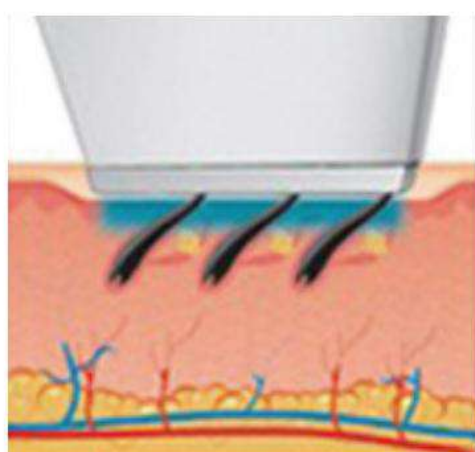

Chlazená špička ochlazuje a chrání horní vrstvy pokožky a zlepšuje es komfort ošetření.

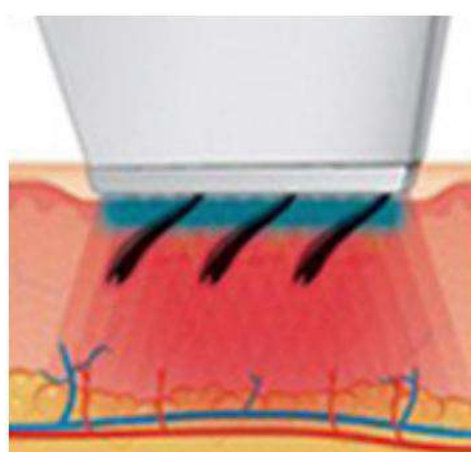

Poslední paprsek se pohybuje přes kůži a je absorbován vlasovým stvolem a přeměněn na teplo.

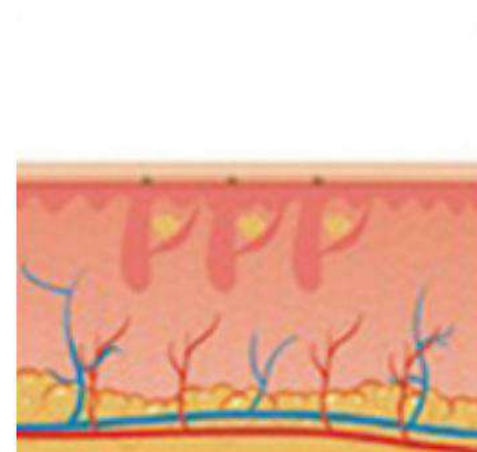

To účinně poškozuje vlasové folikuly, které výrazně brání jeho schopnosti znovu růst.



Aplikace



Odstranění vlasů



Zmenšit póry



Omlazení pleti

Rozsah léčby

Vhodné pro různé typy pokožky odstranění nežádoucích chloupků



Nohy



Podpaží



Pusa



Ramena



Bikiny




Vousy




Výhody



Trojitý laser s delší vlnovou délkou a hlubší penetrací může proniknout hluboko do vlasového folikulu.

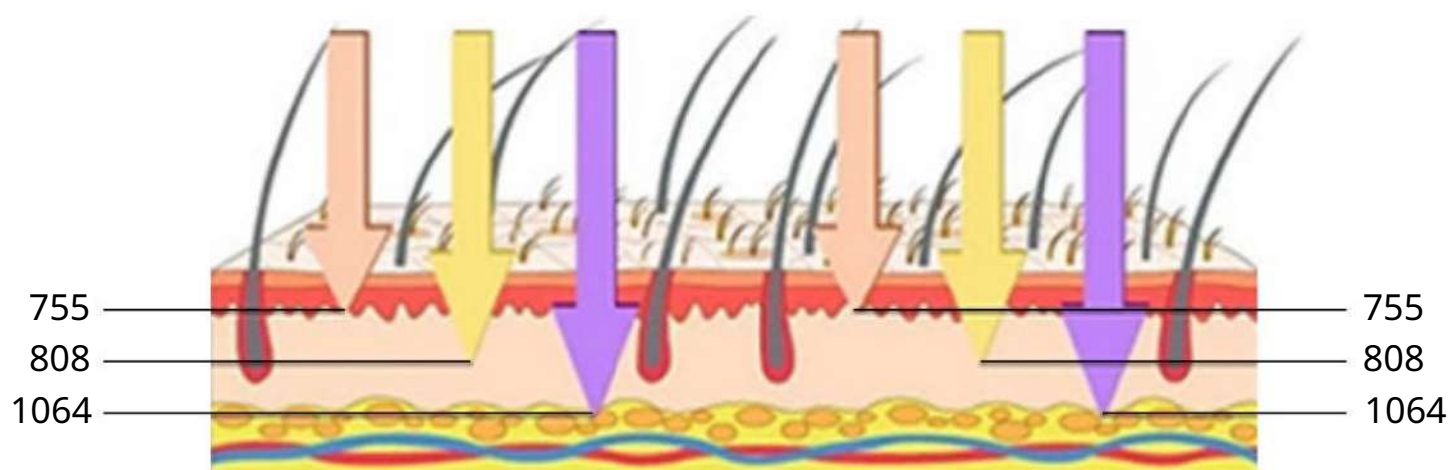

Větší velikost bodu, hlubší penetrace 12 mm*23 mm velká velikost bodu umožňuje hlubší hloubku penetrace.

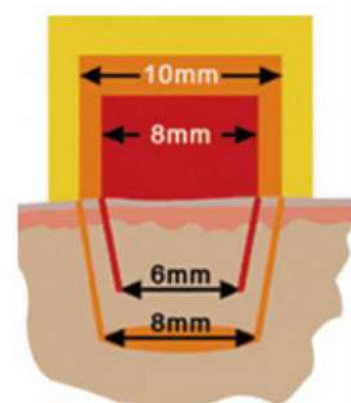

Velikost velkého bodu 12 * 23 mm, téměř 3krát větší než většina diodového laseru na trhu, což může zkrátit dobu ošetření na 1/3.

Bez omezení typu pleti, dokonce i opálená pokožka, prakticky bez bolesti.



Zobrazení podrobností

1 Ošetřovací rukojeť FH-05

2 Dotyková obrazovka

3 Nouzové tlačítko

4 Klíčový spínač



Ošetřovací rukojeť FH-05

12 mm * 23 mm velká rukojeť pro bodové ošetření může realizovat posuvné pevné body a ošetřit jemné části vysokou rychlostí odstraňování.



Světlovod Ohnutá hlava






Odstraňování chloupků z nosních dírek /
ušních chloupků odstranění



Specifikace

Mode name	Supreme ICE-KK
Laser type	Diodový laser se 3 vlnovými délkami
Wavelength	755nm+808nm+1064nm
Laser power	1200W
Energy density	3-180 J/cm ²
Pulse width	5-300 ms
Energy deviation	±10 %
Spot sizes	12mm x 23mm
Frequency	1-10Hz
Water quality detect	Chlazení TEC + vodní chlazení
Screen size	10,4 palce
Package dimension	Rozměry 96*46*126 cm
Power supply	AC110/220V±10%, 50Hz-60Hz

Foto před a po

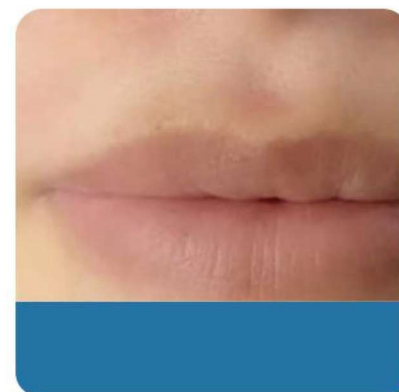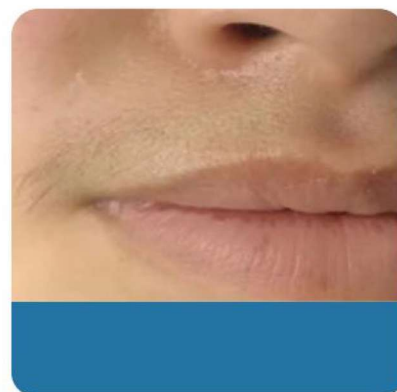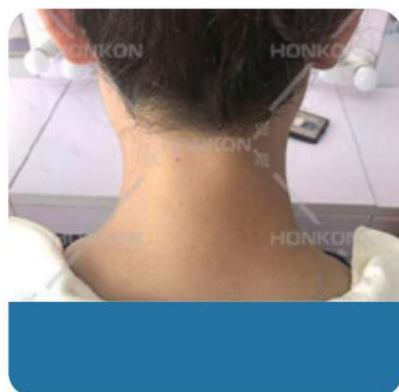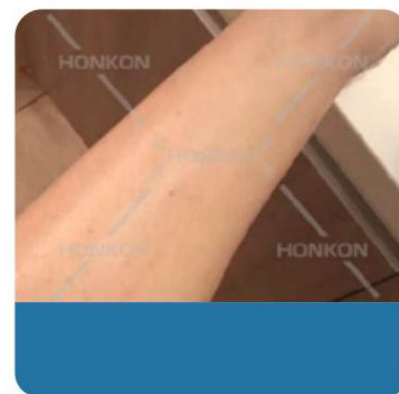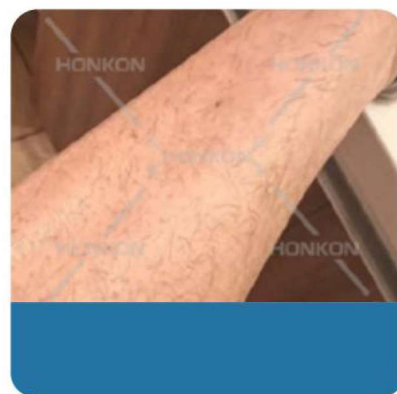

Dodavatel v ČR: Globa retail s.r.o., sídlem Kozí 4 Brno 60200

IČ: 29371210, DIČ:CZ29371210

Telefon: +420608821197, email: info@globalretail.cz